

G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo : BA1116N (2022-04-26 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位 : Lab014

	Control N		Control D	
QC Control Lot No.	BA1116N		BA1116D	
檢驗期間	Month (2025/01)	CUM (2024/11/05~2025/01/31)	Month (2025/01)	CUM (2024/11/05~2025/01/31)
累計點數 (N)	9	26	9	26
累計平均值 (Mean) U/gHb	14.3	14.3	5.5	5.5
累計標準差 (SD)	0.4	0.3	0.2	0.1
累計變異係數 (CV) %	2.8	2.1	3.6	1.8
目標值 (Target) U/gHb	14.4	14.4	5.7	5.7
總誤差 (TE) %	6.3	4.9	10.8	7.1
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
σ	>6	>6	4.6	>6

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2025 01 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2024 11 05 至 2025 01 31 Change


TOP

Control N 及 Control D SDI
分佈圖

Lot No.: BA1116N; 檢驗期間 : 2024-11-05 至 2025-01-31; 目標值 (Target): 14.4; 參考標準差 (SD): 0.40 (●)

Lot No.: BA1116D; 檢驗期間 : 2024-11-05 至 2025-01-31; 目標值 (Target): 5.7; 參考標準差 (SD): 0.20 (□)

單位 : Lab014

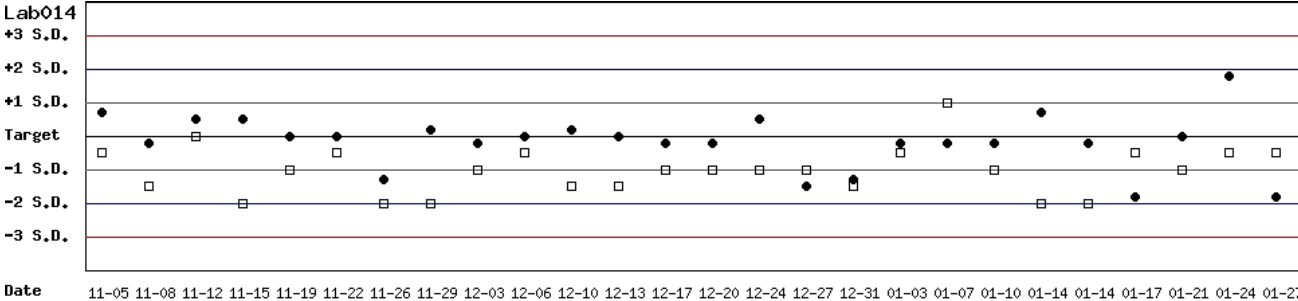


月統計 : 2025 01 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2024 11 05 至 2025 01 31 Change

TOP

Control N SDI 分佈圖

Lot No.: BA1116N; 檢驗期間 : 2024-11-05 至 2025-01-31; 目標值 (Target): 14.4; 參考標準差 (SD): 0.40

單位 : Lab014

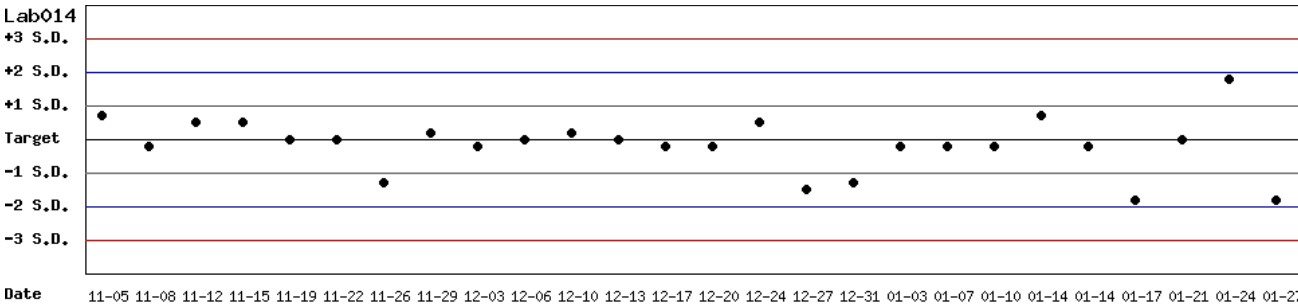


月統計 : 2025 01 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2024 11 05 至 2025 01 31 Change

TOP

Control D SDI 分佈圖

Lot No.: BA1116D ; 檢驗期間 : 2024-11-05 至 2025-01-31 ; 目標值 (Target) : 5.7 ; 參考標準差 (SD) : 0.20

單位 : Lab014

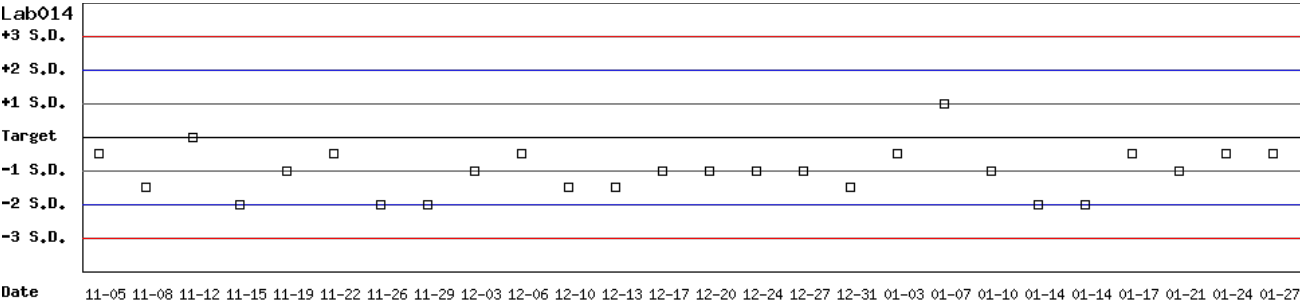

月統計 : 2025 ▾ 01 ▾ Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2024 ▾ 11 ▾ 05 ▾ 至 2025 ▾ 01 ▾ 31 ▾ Change

[\[TOP\]](#)

各檢驗單位 **G6PD** 定量檢驗 內部品管統計結果（總表一）

選擇 LotNo： BA1116N (2022-04-26 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit： 3 - Innovation Change

列印總表一

月統計表

統計月份： 2025 01 Change

		Control N (Lot No.: BA1116N)								Control D (Lot No.: BA1116D)							
UnitID 	Reagent Kit (Code) 	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab009	3	12.8	14.1	5	0.2	1.4	13.0	20	>6	4.2	4.9	5	0.1	2.0	20.7	20	1.7
Lab013	3	15.1	15.1	2	-	-	-	20	-	5.4	5.2	2	-	-	-	20	-
Lab014	3	14.4	14.3	9	0.4	2.8	6.3	20	>6	5.7	5.5	9	0.2	3.6	10.8	20	4.6
Lab029	3	14.8	14.4	5	0.1	0.7	4.1	20	>6	5.1	4.8	5	0.1	2.1	10.0	20	>6
Lab051	3	14.4	15.2	6	5.3	34.9	75.3	20	0.4	5.7	7.0	6	5.6	80.0	182.8	20	0.0
Total	-	-	14.5	27	2.4	16.6	-	-	-	-	5.6	27	2.6	46.4	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[\[TOP\]](#)

累計統計表

累計期間：自 2022 06 01 至 2025 01 31 Change

		Control N (Lot No.: BA1116N)								Control D (Lot No.: BA1116D)							
UnitID 	Reagent Kit (Code) 	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab004	3	14.8	14.8	143	0.4	2.7	5.4	30	>6	4.6	4.6	143	0.2	4.3	8.7	30	>6
Lab009	3	12.8	14.1	36	0.4	2.8	15.8	20	3.5	4.2	5.1	36	0.2	3.9	29.3	20	-0.4
Lab011	3	15.2	14.3	82	1.1	7.7	21.3	20	1.8	5.4	4.8	82	0.4	8.3	27.8	20	1.1
Lab013	3	15.1	15.3	176	0.3	2.0	5.2	20	>6	5.4	5.5	176	0.2	3.6	9.1	20	5.0
Lab014	3	14.4	14.3	228	0.3	2.1	4.9	20	>6	5.7	5.6	228	0.2	3.6	8.9	20	5.1
Lab016	3	12.8	12.8	92	0.4	3.1	6.3	20	>6	4.2	4.3	92	0.2	4.7	11.7	20	3.7
Lab029	3	14.8	15.2	114	0.6	3.9	10.6	20	4.4	5.1	5.3	114	0.3	5.7	15.2	20	2.8
Lab044	3	14.7	14.7	61	0.6	4.1	8.2	20	4.9	5.1	5.1	61	0.1	2.0	3.9	20	>6
Lab051	3	14.4	14.6	64	1.5	10.3	21.9	20	1.8	5.7	5.3	64	1.7	32.1	71.2	20	0.4
Total	-	-	14.5	996	0.9	6.2	-	-	-	-	5.1	996	0.7	13.7	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

[\[TOP\]](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Innovation	3

各檢驗單位 **G6PD** 定量檢驗 內部品管統計結果（總表二）

選擇 LotNo： BA1116N (2022-04-26 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit： 3 - Innovation Change

列印總表二

Control N 月統計與累計統計之比較表

Control N (Lot No.: BA1116N)																	
Month (2025/01)										CUM (2022/06/01~2025/01/31)							
UnitID 	Reagent Kit (Code) 	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab004	3	14.8	-	0	-	-	-	30	-	14.8	14.8	143	0.4	2.7	5.4	30	>6
Lab009	3	12.8	14.1	5	0.2	1.4	13.0	20	>6	12.8	14.1	36	0.4	2.8	15.8	20	3.5
Lab011	3	15.2	-	0	-	-	-	20	-	15.2	14.3	82	1.1	7.7	21.3	20	1.8
Lab013	3	15.1	15.1	2	-	-	-	20	-	15.1	15.3	176	0.3	2.0	5.2	20	>6
Lab014	3	14.4	14.3	9	0.4	2.8	6.3	20	>6	14.4	14.3	228	0.3	2.1	4.9	20	>6
Lab016	3	12.8	-	0	-	-	-	20	-	12.8	12.8	92	0.4	3.1	6.3	20	>6
Lab029	3	14.8	14.4	5	0.1	0.7	4.1	20	>6	14.8	15.2	114	0.6	3.9	10.6	20	4.4
Lab044	3	14.7	-	0	-	-	-	20	-	14.7	14.7	61	0.6	4.1	8.2	20	4.9
Lab051	3	14.4	15.2	6	5.3	34.9	75.3	20	0.4	14.4	14.6	64	1.5	10.3	21.9	20	1.8
Total	-	-	14.5	27	2.4	16.6	-	-	-	-	14.5	996	0.9	6.2	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2025 01 Change

累計期間 (CUM)：自 2022 06 01 至 2025 01 31 Change

[\[TOP\]](#)

Control D 月統計與累計統計之比較表

Control D (Lot No.: BA1116D)																	
Month (2025/01)										CUM (2022/06/01~2025/01/31)							
UnitID 	Reagent Kit (Code) 	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
Lab004	3	4.6	-	0	-	-	-	30	-	4.6	4.6	143	0.2	4.3	8.7	30	>6
Lab009	3	4.2	4.9	5	0.1	2.0	20.7	20	1.7	4.2	5.1	36	0.2	3.9	29.3	20	-0.4
Lab011	3	5.4	-	0	-	-	-	20	-	5.4	4.8	82	0.4	8.3	27.8	20	1.1
Lab013	3	5.4	5.2	2	-	-	-	20	-	5.4	5.5	176	0.2	3.6	9.1	20	5.0
Lab014	3	5.7	5.5	9	0.2	3.6	10.8	20	4.6	5.7	5.6	228	0.2	3.6	8.9	20	5.1
Lab016	3	4.2	-	0	-	-	-	20	-	4.2	4.3	92	0.2	4.7	11.7	20	3.7
Lab029	3	5.1	4.8	5	0.1	2.1	10.0	20	>6	5.1	5.3	114	0.3	5.7	15.2	20	2.8
Lab044	3	5.1	-	0	-	-	-	20	-	5.1	5.1	61	0.1	2.0	3.9	20	>6
Lab051	3	5.7	7.0	6	5.6	80.0	182.8	20	0.0	5.7	5.3	64	1.7	32.1	71.2	20	0.4
Total	-	-	5.6	27	2.6	46.4	-	-	-	-	5.1	996	0.7	13.7	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [| 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) |] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 x 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計： 2025 01 Change

累計期間 (CUM)：自 2022 06 01 至 2025 01 31 Change

[\[TOP\]](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Innovation	3