

# 2018年02月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告


## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	33	33
中位數 (Median)	13.4 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	13.6 (U/gHb)	5.5 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.8	0.4
變異係數 (CV)	5.9%	7.3%
G6PD 檢驗值範圍	12.5 ~ 15.1 (U/gHb)	4.6 ~ 6.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.2 (g/dL)	2.0 ~ 2.3 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Trinity reagent kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

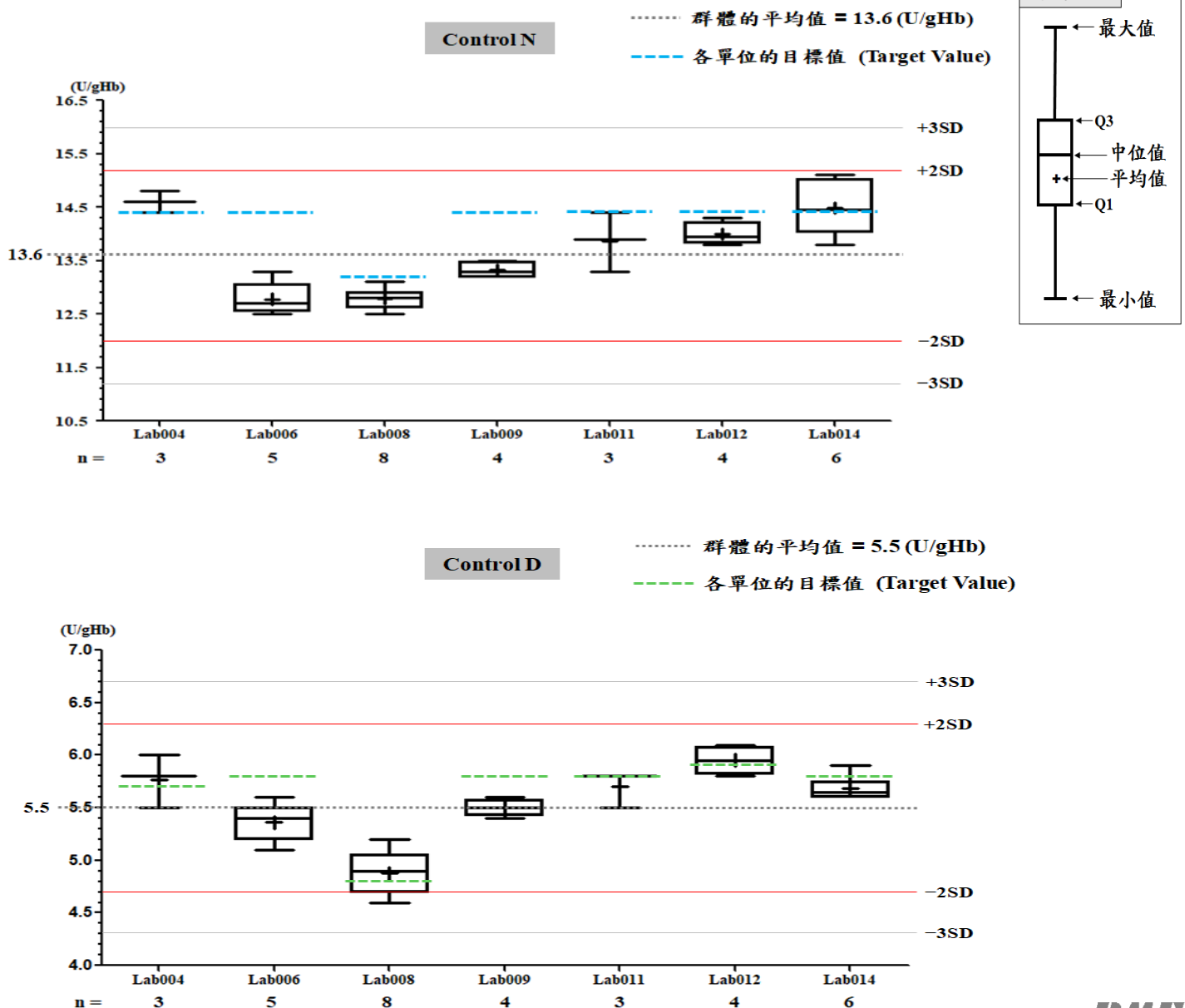

# G6PD 定量檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo : AE0909N (2016-01-01 ~ 2100-12-31) Change

列印圖表

檢驗單位 : Lab008

QC Control Lot No.	Control N		Control D	
	AE0909N		AE0909D	
檢驗期間	Month (2018/02)	CUM (2016/02/01~2018/02/28)	Month (2018/02)	CUM (2016/02/01~2018/02/28)
累計點數 (N)	8	17	8	17
累計平均值 (Mean) U/gHb	12.8	13.0	4.9	4.9
累計標準差 (SD)	0.2	0.2	0.2	0.2
累計變異係數 (CV) %	1.6	1.5	4.1	4.1
目標值 (Target) U/gHb	13.2	13.2	4.8	4.8
總誤差 (TE) %	6.2	4.6	10.2	10.2
可容許總誤差 (TEa) %	20	20	20	20
$\sigma$	>6	>6	4.4	4.4

誤差 (Bias)% =  $\{ [ | \text{累計平均值 (Mean)} - \text{目標值 (Target)} | ] / \text{目標值 (Target)} \} \times 100\%$   
 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)  
 $\sigma$  (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)


月統計 : 2018 02 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change

[TOP](#)

## Control N SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909N ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2018-02-28 ; 目標值 (Target) : 13.2 ; 參考標準差 (SD) : 0.50

單位 : Lab008

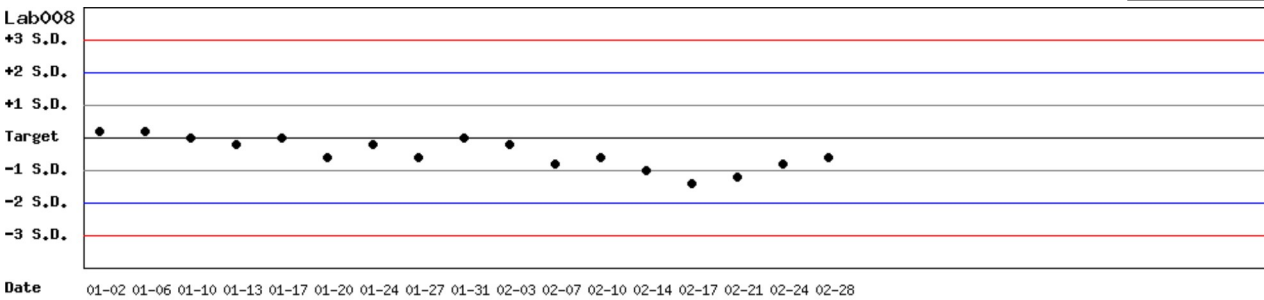


月統計 : 2018 02 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change

[TOP](#)

## Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909D ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2018-02-28 ; 目標值 (Target) : 4.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.30

單位 : Lab008

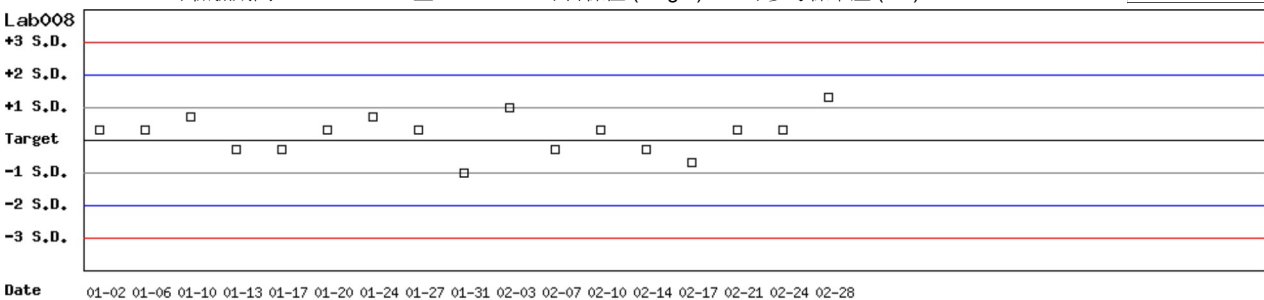

月統計 : 2018 02 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change


[TOP](#)

## Control N 及 Control D SDI 分佈圖

Lot No.: AE0909N ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2018-02-28 ; 目標值 (Target) : 13.2 ; 參考標準差 (SD) : 0.50 ( ● )

Lot No.: AE0909D ; 檢驗期間 : 2016-02-01 至 2018-02-28 ; 目標值 (Target) : 4.8 ; 參考標準差 (SD) : 0.30 ( □ )

單位 : Lab008

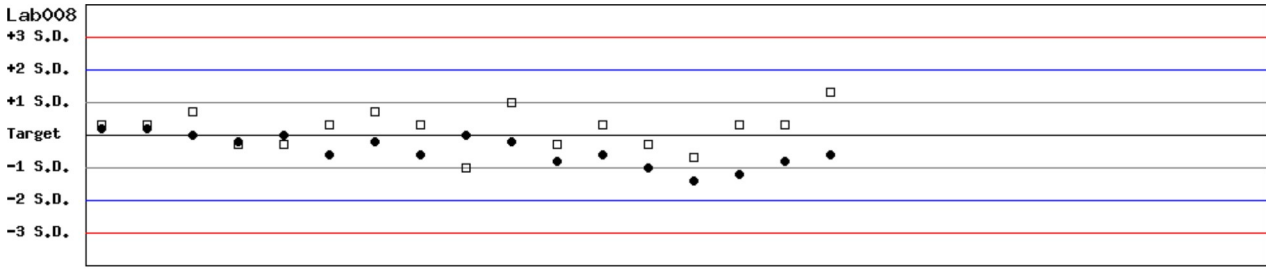

Date 01-02 01-06 01-10 01-13 01-17 01-20 01-24 01-27 01-31 02-03 02-07 02-10 02-14 02-17 02-21 02-24 02-28

月統計 : 2018 02 Change ; 累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change

[TOP](#)

# 各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表一)

選擇 LotNo :

選擇 Reagent Kit :

[列印總表一](#)

## 月統計表

統計月份 :

UnitID <sup>↑</sup>	Reagent Kit (Code) <sup>↑</sup>	Control N (Lot No.: AE0909N)								Control D (Lot No.: AE0909D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
<a href="#">Lab004</a>	1	14.4	14.6	3	0.2	1.4	4.1	20	>6	5.7	5.8	3	0.3	5.2	12.1	20	3.5
<a href="#">Lab006</a>	1	14.4	12.8	5	0.3	2.3	15.8	20	3.9	5.8	5.4	5	0.2	3.7	14.3	20	3.5
<a href="#">Lab008</a>	1	13.2	12.8	8	0.2	1.6	6.2	20	>6	4.8	4.9	8	0.2	4.1	10.2	20	4.4
<a href="#">Lab009</a>	1	14.4	13.3	4	0.2	1.5	10.6	20	>6	5.8	5.5	4	0.1	1.8	8.8	20	>6
<a href="#">Lab011</a>	1	14.4	13.9	3	0.6	4.3	12.1	20	3.8	5.8	5.7	3	0.2	3.5	8.7	20	5.2
<a href="#">Lab012</a>	1	14.4	14.0	4	0.2	1.4	5.6	20	>6	5.9	6.0	4	0.1	1.7	5.0	20	>6
<a href="#">Lab014</a>	1	14.4	14.5	6	0.5	3.4	7.6	20	5.7	5.8	5.7	6	0.1	1.8	5.2	20	>6
Total	-	-	13.6	33	0.8	5.9	-	-	-	-	5.5	33	0.4	7.3	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

## 累計統計表

累計期間 : 自    至

UnitID <sup>↑</sup>	Reagent Kit (Code) <sup>↑</sup>	Control N (Lot No.: AE0909N)								Control D (Lot No.: AE0909D)							
		Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
<a href="#">Lab003</a>	1	14.4	14.4	267	0.5	3.5	6.9	20	5.7	5.8	5.8	267	0.2	3.4	6.9	20	5.9
<a href="#">Lab004</a>	1	14.4	14.5	18	0.2	1.4	3.5	20	>6	5.7	5.7	18	0.2	3.5	7.0	20	5.7
<a href="#">Lab006</a>	1	14.4	13.6	59	0.5	3.7	12.9	20	3.9	5.8	5.5	59	0.2	3.6	12.4	20	4.1
<a href="#">Lab007</a>	1	14.3	13.9	300	0.9	6.5	15.7	20	2.6	5.6	5.4	300	0.4	7.4	18.4	20	2.2
<a href="#">Lab008</a>	1	13.2	13.0	17	0.2	1.5	4.6	20	>6	4.8	4.9	17	0.2	4.1	10.2	20	4.4
<a href="#">Lab009</a>	1	14.4	14.4	84	0.9	6.3	12.5	20	3.2	5.8	5.9	84	0.4	6.8	15.3	20	2.7
<a href="#">Lab010</a>	1	15.3	15.5	19	0.5	3.2	7.8	20	5.8	6.3	6.5	19	0.3	4.6	12.4	20	3.7
<a href="#">Lab011</a>	1	14.4	13.7	60	0.3	2.2	9.2	20	>6	5.8	5.7	60	0.2	3.5	8.7	20	5.2
<a href="#">Lab012</a>	1	14.4	14.3	102	0.4	2.8	6.3	20	>6	5.9	6.0	102	0.2	3.3	8.4	20	5.5
<a href="#">Lab013</a>	1	14.5	13.8	40	0.3	2.2	9.2	20	>6	5.7	5.7	40	0.1	1.8	3.5	20	>6
<a href="#">Lab014</a>	1	14.4	14.5	102	0.5	3.4	7.6	20	5.7	5.8	5.6	102	0.2	3.6	10.6	20	4.6
<a href="#">Lab016</a>	1	15.0	14.7	23	0.9	6.1	14.2	20	3.0	5.3	5.3	23	0.3	5.7	11.3	20	3.5
<a href="#">Lab029</a>	1	14.4	14.3	20	0.1	0.7	2.1	20	>6	5.8	5.6	20	0.1	1.8	7.0	20	>6
<a href="#">Lab030</a>	1	14.4	14.3	3	0.5	3.5	7.7	20	5.5	5.8	5.4	3	0.3	5.6	18.0	20	2.3
<a href="#">Lab044</a>	1	14.4	15.2	57	0.9	5.9	17.4	20	2.4	5.8	6.3	57	0.4	6.3	21.3	20	1.8
Total	-	-	14.2	1171	0.8	5.6	-	-	-	-	5.7	1171	0.4	7.0	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

[TOP](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1

## 各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 (總表二)

選擇 LotNo : AE0909N (2016-01-01 ~ 2100-12-31) Change

選擇 Reagent Kit : 1 - Trinity Change

列印總表二

### Control N 月統計與累計統計之比較表

		Control N (Lot No.: AE0909N)															
		Month (2018/02)								CUM (2016/02/01~2018/02/28)							
UnitID <sup>⚡</sup>	Reagent Kit (Code) <sup>⚡</sup>	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
<a href="#">Lab003</a>	1	14.4	-	0	-	-	-	20	-	14.4	14.4	267	0.5	3.5	6.9	20	5.7
<a href="#">Lab004</a>	1	14.4	14.6	3	0.2	1.4	4.1	20	>6	14.4	14.5	18	0.2	1.4	3.5	20	>6
<a href="#">Lab006</a>	1	14.4	12.8	5	0.3	2.3	15.8	20	3.9	14.4	13.6	59	0.5	3.7	12.9	20	3.9
<a href="#">Lab007</a>	1	14.3	-	0	-	-	-	20	-	14.3	13.9	300	0.9	6.5	15.7	20	2.6
<a href="#">Lab008</a>	1	13.2	12.8	8	0.2	1.6	6.2	20	>6	13.2	13.0	17	0.2	1.5	4.6	20	>6
<a href="#">Lab009</a>	1	14.4	13.3	4	0.2	1.5	10.6	20	>6	14.4	14.4	84	0.9	6.3	12.5	20	3.2
<a href="#">Lab010</a>	1	15.3	-	0	-	-	-	20	-	15.3	15.5	19	0.5	3.2	7.8	20	5.8
<a href="#">Lab011</a>	1	14.4	13.9	3	0.6	4.3	12.1	20	3.8	14.4	13.7	60	0.3	2.2	9.2	20	>6
<a href="#">Lab012</a>	1	14.4	14.0	4	0.2	1.4	5.6	20	>6	14.4	14.3	102	0.4	2.8	6.3	20	>6
<a href="#">Lab013</a>	1	14.5	-	0	-	-	-	20	-	14.5	13.8	40	0.3	2.2	9.2	20	>6
<a href="#">Lab014</a>	1	14.4	14.5	6	0.5	3.4	7.6	20	5.7	14.4	14.5	102	0.5	3.4	7.6	20	5.7
<a href="#">Lab016</a>	1	15.0	-	0	-	-	-	20	-	15.0	14.7	23	0.9	6.1	14.2	20	3.0
<a href="#">Lab029</a>	1	14.4	-	0	-	-	-	20	-	14.4	14.3	20	0.1	0.7	2.1	20	>6
<a href="#">Lab030</a>	1	14.4	-	0	-	-	-	20	-	14.4	14.3	3	0.5	3.5	7.7	20	5.5
<a href="#">Lab044</a>	1	14.4	-	0	-	-	-	20	-	14.4	15.2	57	0.9	5.9	17.4	20	2.4
Total	-	-	13.6	33	0.8	5.9	-	-	-	-	14.2	1171	0.8	5.6	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2018 02 Change

累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change

[TOP](#)

### Control D 月統計與累計統計之比較表

		Control D (Lot No.: AE0909D)															
		Month (2018/02)								CUM (2016/02/01~2018/02/28)							
UnitID <sup>⚡</sup>	Reagent Kit (Code) <sup>⚡</sup>	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ	Target (U/gHb)	Mean (U/gHb)	n for Mean	SD	CV (%)	TE (%)	TEa (%)	σ
<a href="#">Lab003</a>	1	5.8	-	0	-	-	-	20	-	5.8	5.8	267	0.2	3.4	6.9	20	5.9
<a href="#">Lab004</a>	1	5.7	5.8	3	0.3	5.2	12.1	20	3.5	5.7	5.7	18	0.2	3.5	7.0	20	5.7
<a href="#">Lab006</a>	1	5.8	5.4	5	0.2	3.7	14.3	20	3.5	5.8	5.5	59	0.2	3.6	12.4	20	4.1
<a href="#">Lab007</a>	1	5.6	-	0	-	-	-	20	-	5.6	5.4	300	0.4	7.4	18.4	20	2.2
<a href="#">Lab008</a>	1	4.8	4.9	8	0.2	4.1	10.2	20	4.4	4.8	4.9	17	0.2	4.1	10.2	20	4.4
<a href="#">Lab009</a>	1	5.8	5.5	4	0.1	1.8	8.8	20	>6	5.8	5.9	84	0.4	6.8	15.3	20	2.7
<a href="#">Lab010</a>	1	6.3	-	0	-	-	-	20	-	6.3	6.5	19	0.3	4.6	12.4	20	3.7
<a href="#">Lab011</a>	1	5.8	5.7	3	0.2	3.5	8.7	20	5.2	5.8	5.7	60	0.2	3.5	8.7	20	5.2
<a href="#">Lab012</a>	1	5.9	6.0	4	0.1	1.7	5.0	20	>6	5.9	6.0	102	0.2	3.3	8.4	20	5.5
<a href="#">Lab013</a>	1	5.7	-	0	-	-	-	20	-	5.7	5.7	40	0.1	1.8	3.5	20	>6
<a href="#">Lab014</a>	1	5.8	5.7	6	0.1	1.8	5.2	20	>6	5.8	5.6	102	0.2	3.6	10.6	20	4.6
<a href="#">Lab016</a>	1	5.3	-	0	-	-	-	20	-	5.3	5.3	23	0.3	5.7	11.3	20	3.5
<a href="#">Lab029</a>	1	5.8	-	0	-	-	-	20	-	5.8	5.6	20	0.1	1.8	7.0	20	>6
<a href="#">Lab030</a>	1	5.8	-	0	-	-	-	20	-	5.8	5.4	3	0.3	5.6	18.0	20	2.3
<a href="#">Lab044</a>	1	5.8	-	0	-	-	-	20	-	5.8	6.3	57	0.4	6.3	21.3	20	1.8
Total	-	-	5.5	33	0.4	7.3	-	-	-	-	5.7	1171	0.4	7.0	-	-	-

誤差 (Bias)% = { [ | 累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target) | ] / 目標值 (Target) } x 100%

總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)

σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)% ) / 累計變異係數 (CV)

月統計 : 2018 02 Change

累計期間 (CUM) : 自 2016 02 01 至 2018 02 28 Change

[TOP](#)

Reagent Kit	Reagent Code
Trinity	1